

smart. maximus lift 2.0

O único com tecnologia Dual Tech
para **lifting não cirúrgico**



ULTRASSOM
MICROFOCADO

ULTRASSOM
MACROFOCADO

RADIOFREQUÊNCIA
MICROAGULHADA

 smartgr.TECH

O que é Maximus Lift 2.0?

É uma plataforma de **ultrassom macro e microfocado + radiofrequência microagulhada**, a qual promove **efeito lifting não cirúrgico** com indicações para todas as partes do corpo.

Ultrassom MACRO E MICROFOCADO

O HIFU emite **ondas ultrassônicas de alta intensidade com foco e profundidade controlados** na área a ser tratada.

A onda ultrassônica de alta intensidade gera **pontos de termocoagulação** na região com **aquecimento controlado**. Esse processo gera **retração das fibras de colágeno existente** e o estímulo da neocolagênese.

Com a **tecnologia quadridimensional do Maximus Lift** a ação ocorre em multicamadas, atingindo desde a **SMAS** (sistema músculo aponeurótico superficial) até a epiderme, sem danos aparentes a pele.

Facial


Lifting
Rugas faciais
Linhas de expressão
Flacidez tissular

Corporal

Flacidez tissular
Remodelamento corporal

Harmonização Íntima

Atrofia urogenital
Hiperfrouxidão

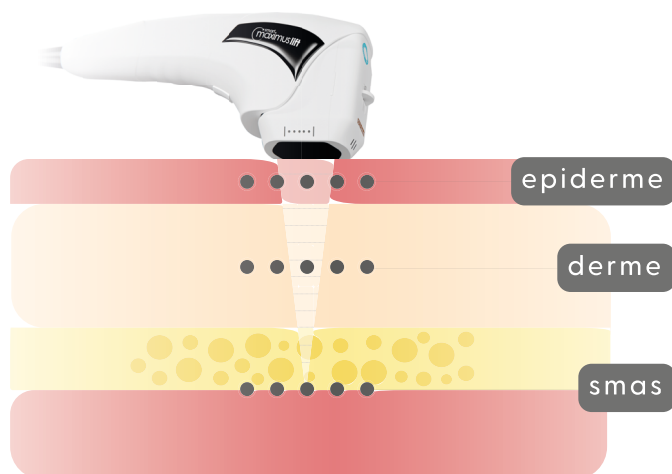

APLICADOR MULTILINEAR

- ✓ Modo rápido/lento;
- ✓ Até 300 pontos por aplicação;
- ✓ Contabilizado por linhas;
- ✓ Ajuste de quantidade de linhas;
- ✓ Ajuste de energia de 0,1 a 2,0 J.

HIFU Microfocado



HIFU Macrofocado



APLICADOR PONTUAL

- ✓ Modo de varredura;
- ✓ Ajuste de frequência de 1 a 9 Hz;
- ✓ Ajuste de energia de 1 a 8 J;

HIFU Microfocado




HIFU Macrofocado



APLICADOR CORPORAL

- ✓ Modo rápido/lento;
- ✓ Maior número de pontos de termoregulação: **pode chegar até 576 pontos por ciclo**;
- ✓ Modo de tratamento 360° para encaixe perfeito no abdômen;
- ✓ Intensidade ajustável de 1 a 20 J;
- ✓ Até 526 ciclos com área de 4x4 cm.

HIFU Macrofocado

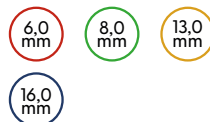

APLICADOR VAGINAL

- ✓ Até 17 pontos lineares por disparo;
- ✓ Acompanha perineômetro;
- ✓ Ajuste de rotação, ângulo, comprimento e distância;
- ✓ Ajuste de energia de 0,1 a 1,5 J;
- ✓ Régua de profundidade de cartucho

HIFU Microfocado



Perineômetro:
Sonda inflável vaginal responsável por informar ao profissional a intensidade da contração exercida pelos músculos do assoalho pélvico do paciente.





Radiofrequência Microagulhada

Uma **combinação poderosa** da radiofrequência fracionada com o microagulhamento.

A radiofrequência fracionada estimula a **produção de novas fibras de colágeno** e a retração tecidual, com consequente **rejuvenescimento**, enquanto o microagulhamento **potencializa este resultado através de suas microlesões**, resultando em uma aparência mais firme da pele e **efeito lifting dos seus sonhos**.

O **Maximus Lift 2.0** leva seus protocolos a um novo patamar de performance. Com dois disparadores de radiofrequência microagulhada, o equipamento permite tratar duas regiões ao mesmo tempo, **tornando cada sessão mais rápida, eficiente e com resultados ainda mais impressionantes**. Com profundidade de até 7mm no corpo e 2,5mm no rosto, oferece versatilidade e precisão para diferentes áreas, potencializando o estímulo de colágeno e garantindo um efeito lifting poderoso e duradouro. Mais tecnologia, mais resultado, em menos tempo.

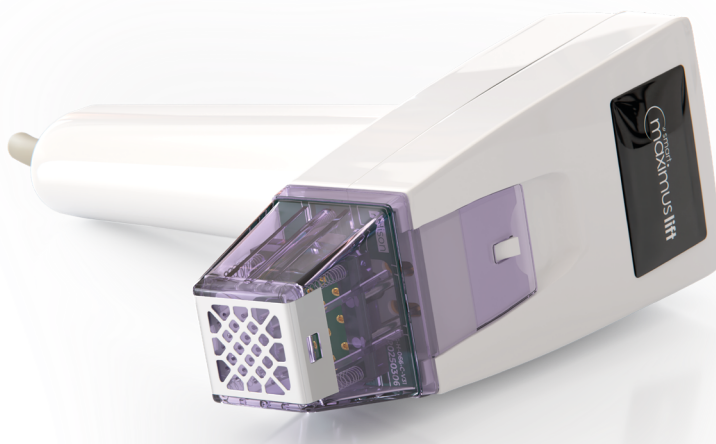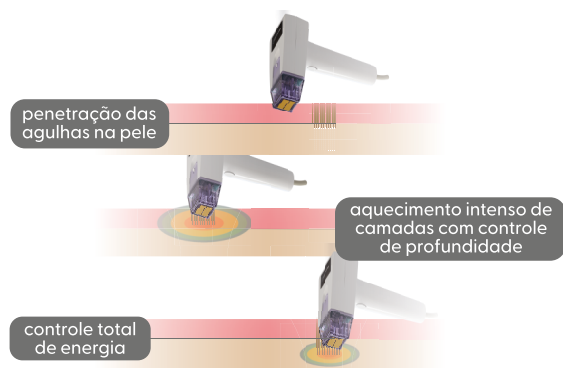

12

AGULHAS

- ✓ Estrias;
- ✓ Rugas profundas.



24

AGULHAS


- ✓ Cicatrizes de acne;
- ✓ Tratamentos capilares.



40

AGULHAS

- ✓ Rejuvenescimento;
- ✓ Flacidez;
- ✓ Gordura localizada;
- ✓ Celulite.

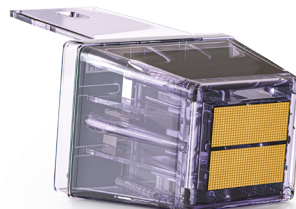

378

AGULHAS

- ✓ Flacidez de pálpebras;
- ✓ Regiões sensíveis;
- ✓ Permeação de ativos.

Vantagens

Otimize o tempo de atendimento

Agora com dois aplicadores de radiofrequência microagulhada, é possível realizar dois procedimentos de forma simultânea, diminuindo o tempo do tratamento.

Mais versatilidade

Realize diversos procedimentos em uma única plataforma de forma rápida, segura e precisa.

smart. maximus lift 2.0

A REVOLUÇÃO DERMATOLÓGICA

O único com tecnologia Dual Tech
para **lifting não cirúrgico**



FAQ - Maximus Lift

Qual é a diferença entre o Maximus Lift e o Maximus Lift 2.0?

O Maximus Lift 2.0 agora conta com dois disparadores de radiofrequência microagulhada, o que permite tratar mais de uma região simultaneamente, otimizando o tempo da sessão e aprimorando os resultados do procedimento.

Em quais regiões do corpo posso utilizar o Maximus Lift?

O HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) pode ser utilizado no rosto, pescoço e colo, mãos e corpo.

Já a RFM (Radiofrequência Microagulhada) pode ser utilizada em rosto, pescoço, colo, mãos, corpo e tratamentos capilares.

É um procedimento seguro?

Sim, tanto o HIFU quanto a RFM são procedimentos considerados seguros quando realizados por profissionais especializados e seguindo as diretrizes específicas.

Quanto tempo leva a recuperação?

Após o procedimento, o paciente pode retornar às suas atividades normais, pois não há tempo de recuperação significativo. No entanto, é recomendável evitar a exposição ao sol e seguir as orientações do profissional para obter os melhores resultados.

Qual o intervalo entre as aplicações? Quanto tempo para ver os resultados?

HIFU: O intervalo entre as sessões de HIFU pode variar dependendo do protocolo de tratamento recomendado pelo seu profissional, bem como a resposta da sua pele ao procedimento. Em geral, o intervalo recomendado entre as sessões de HIFU costuma ser de 4 a 6 semanas. Isso permite que a pele se recupere adequadamente e que os resultados do tratamento anterior sejam avaliados antes da obrigação com a próxima sessão. O número total de sessões realizadas também pode variar de acordo com as necessidades individuais e os objetivos do tratamento. É importante seguir as orientações do seu profissional de saúde para obter os melhores resultados e evitar complicações.

RFM: O número de sessões pode variar de acordo com a condição da pele e os resultados desejados, mas geralmente são recomendadas de 3 a 5 sessões, com intervalos de 4 a 6 semanas entre cada uma.

Escaneie o **QR CODE**

