




MAXIMUS lift

A REVOLUÇÃO DERMATOLÓGICA

O único com tecnologia Dual Tech
para **lifting não cirúrgico**

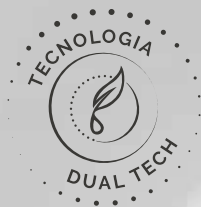

ULTRASSOM
MICROFOCADO

ULTRASSOM
MACROFOCADO

RADIOFREQUÊNCIA
MICROAGULHADA

FACIAL

CORPORAL

ÍNTIMO

O QUE É MAXIMUS LIFT?

É uma plataforma de **ultrassom macro e microfocado + radiofrequência microagulhada**, a qual promove **efeito lifting não cirúrgico** com indicações para todas as partes do corpo.

Ideal para tratar:



flacidez



gordura localizada



rugas




textura da pele

ULTRASSOM MACRO E MICROFOCADO

O **HIFU** emite **ondas ultrassônicas de alta intensidade com foco e profundidade controlados** na área a ser tratada.

A onda ultrassônica de alta intensidade gera **pontos de termocoagulação** na região com **aquecimento controlado**. Esse processo gera **retração das fibras de colágeno existente e o estímulo da neocolagênese**.

Com a **tecnologia quadridimensional** do **Maximus Lift** a ação ocorre em **multicamadas**, atingindo desde a **SMAS** (sistema musculo aponeurótico superficial) até a **epiderme**, sem danos aparentes a pele.

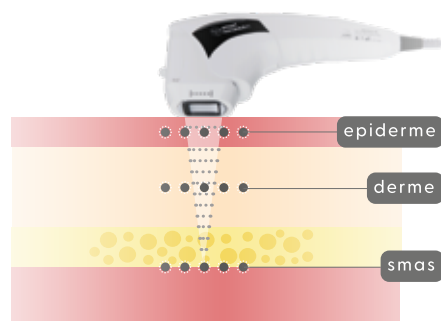

APLICADORES INTELIGENTES



APLICADOR MULTILINEAR

- Modo rápido/lento;
- Até 300 pontos por aplicação;
- Contabilizado por linhas;
- Ajuste de quantidade de linhas e de energia de 0,1 a 2,0 J

HIFU Microfocado

Tamanhos:

1,5 mm

3,0 mm

4,5 mm

HIFU Macrofocado

Tamanhos:

6,0 mm

8,0 mm

10,0 mm

13,0 mm

16,0 mm

APLICADOR PONTUAL

- Modo varredura;
- Ajuste de frequência de 1 a 9 Hz e de energia 1 a 8 J.

HIFU Microfocado

Tamanhos:

1,5 mm

3,0 mm

4,5 mm

HIFU Macrofocado

Tamanhos:

8,0 mm

13,0 mm



APLICADOR VAGINAL

- Até 17 pontos lineares por disparo;
- Acompanha perineômetro;
- Ajuste de rotação, ângulo, comprimento, distância e de energia 0,1 a 1,5 J;
- Régua de profundidade de cartucho.

HIFU Microfocado

Tamanhos:

3,0 mm

4,5 mm

Perineômetro

Sonda inflável vaginal responsável por informar ao profissional a intensidade da contração exercida pelos músculos do assoalho pélvico do paciente.

APLICADOR CORPORAL

- Modo rápido/lento;
- Maior número de pontos de termocoagulação: pode chegar até 576 pontos por ciclo;
- Modo de tratamento 360° para um encaixe perfeito no abdômen;
- Intensidade ajustável de 1 a 20 J, conforme sensorial do paciente;
- Possibilidade de até 526 ciclos com área de 4x4 cm

HIFU Macrofocado

Tamanhos:

6,0 mm

8,0 mm

10,0 mm

13,0 mm


16,0 mm



RADIOFREQUÊNCIA MICROAGULHADA

Uma combinação poderosa da radiofrequência fracionada com o microagulhamento.

A radiofrequência fracionada estimula a **produção de novas fibras de colágeno** e a retração tecidual, com consequente **rejuvenescimento**, enquanto o microagulhamento **potencializa este resultado através de suas microlesões**, resultando em uma aparência mais firme da pele e **efeito lifting dos seus sonhos**.

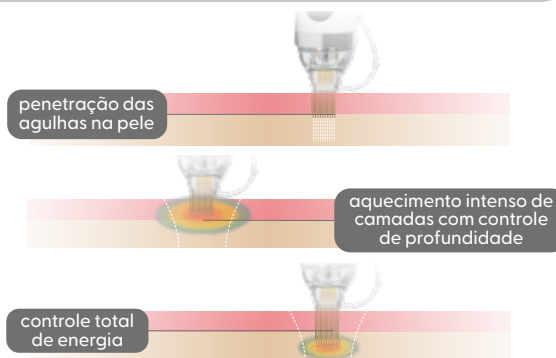

DIVERSOS CARTUCHOS



10

AGULHAS


- Estrias;
- Rugas profundas.



25

AGULHAS


- Cicatrizes de acne;
- Tratamentos capilares.

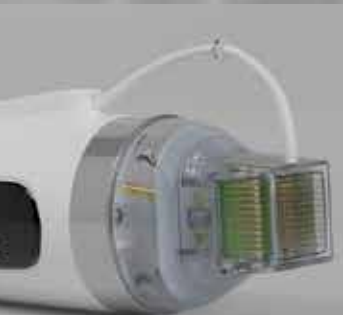

64

AGULHAS

- Rejuvenescimento;
- Flacidez;
- Gordura localizada e celulite.

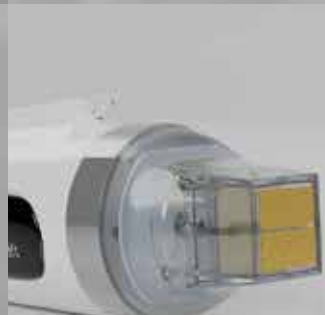

378

AGULHAS

- Flacidez de pálpebras;
- Regiões sensíveis;
- Permeação de ativos.

VANTAGENS



OTIMIZE O TEMPO DE ATENDIMENTO

Programação versátil: modo automático e modo rápido, em diferentes tipos de aplicadores em um tratamento controlado que atinge as múltiplas camadas da pele.

MAIS VERSATILIDADE

Realize diversos procedimentos em uma única plataforma de forma rápida, segura e precisa.

INDICADO PARA MÚLTIPLOS PROCEDIMENTOS



Facial

Lifting
Rugas faciais
Bichectomia
Linhas de expressão
Papada
Flacidez tissular



Corporal

Flacidez tissular
Gordura localizada
Remodelamento



Íntimo

Atrofia urogenital
Hiperfrouxidão vaginal
Monte de Vênus
Lubrificação
Força



MAXIMUS lift

FAQ - Maximus Lift

Em quais regiões do corpo posso utilizar o Maximus Lift?

O HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) pode ser utilizado no rosto, pescoço e colo, mãos e corpo.

Já a RFM (Radiofrequência Microagulhada) pode ser utilizada em rosto, pescoço, colo, mãos, corpo e capilares .

É um procedimento seguro?

Sim, tanto o HIFU quanto a RFM são procedimentos considerados seguros quando realizados por profissionais atendidos e seguindo as diretrizes específicas.

Quanto tempo leva a recuperação?

Após o procedimento, o paciente pode retornar às suas atividades normais, pois **não há tempo de recuperação significativo** . No entanto, é recomendável **evitar a exposição ao sol e seguir as orientações do profissional** para obter os melhores resultados.

Qual o intervalo entre as aplicações? Quanto tempo para ver os resultados?

HIFU: O intervalo entre as sessões de HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) pode variar dependendo do protocolo de tratamento recomendado pelo seu profissional, bem como a resposta da sua pele ao procedimento. Em geral, o intervalo recomendado entre as sessões de HIFU costuma ser de 4 a 6 semanas. Isso permite que a pele se recupere adequadamente e que os resultados do tratamento anterior sejam avaliados antes da obrigação com a próxima sessão. O número total de sessões realizadas também pode variar de acordo com as necessidades individuais e os objetivos do tratamento. É importante seguir as orientações do seu profissional de saúde para obter os melhores resultados e evitar complicações.

RFM: O número de sessões pode variar de acordo com a condição da pele e os resultados desejados, mas geralmente são recomendadas de 3 a 5 sessões, com intervalos de 4 a 6 semanas entre cada uma.

Escaneie o **QR CODE**



📷 | @smartgrbr

🌐 | smartgr.com.br

☎ | +55 (11) 4118-0161